

E·O GAS STERILIZER
Full Automatic EO Gas Sterilizer



ALOPS SE30
ALOPS SE46
ALOPS SE65

본 기기는 의료용 기기입니다.

E.O 가스 멸균기

E.O Gas STERILIZER

Full Automatic E.O Gas Sterilizer



SE30



SE46/SE65



EO가스 멸균기(Ethylene Oxide Gas)란?

스팀 멸균기로는 처리하기 힘든 의료기구를 독성가스 (Ethylene Oxide Gas)를 사용하여 기구에 묻은 병원균 및 미생물을 제거하는 화학적 멸균 방법이다.
 또한 냉멸균(38°C ~ 55°C)의 저온에서 멸균시키는 저온 멸균법으로 가스상태 혹은 분부상태로 분무시켜 다른 멸균법에 비해 가장 유효하며 이용가치가 높다.


SE30/SE46/SE65 Display 실행



SE30/SE46/SE65



accessary

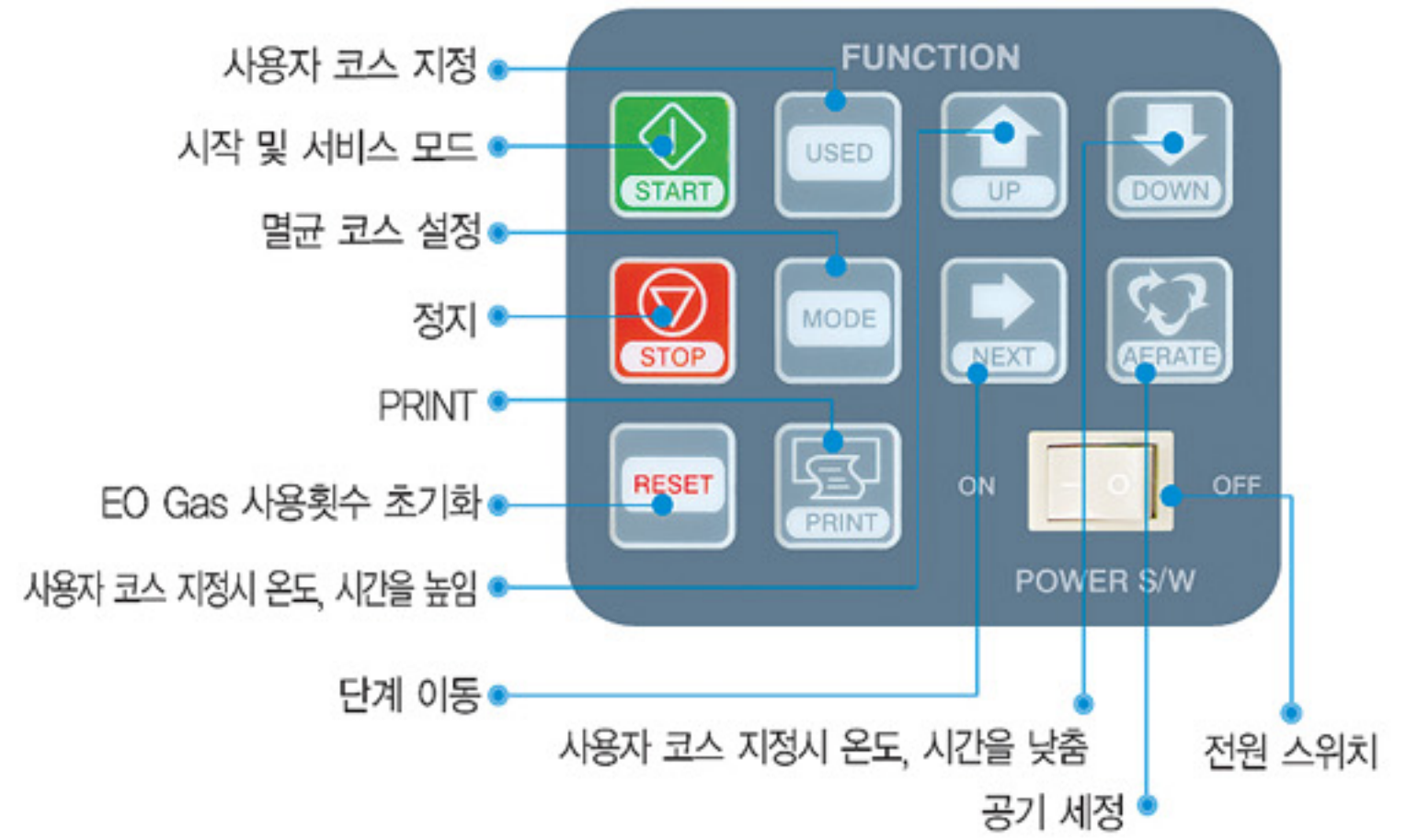


완벽한 멸균 소독

SE30 • SE46 • SE65 특징

- ◎ 마이크로 프로세서 시스템에 의한 Auto Control 방식.
- ◎ DOOR 방식은 간편하고 안전한 원터치 Roller 방식.
- ◎ 고진공 모터에 의한 공기 배제 방식으로 구동.
- ◎ LCD 디스플레이를 사용하여 프로그램, 온도, 압력, 현재 상태를 표시.
- ◎ OPERATION RESUME 기능으로 전력 공급 회복후 계속해서 완료 과정까지 진행.
- ◎ 진공 누설 시험 사이클 (LEAK TEST PROGRAM)가능.
- ◎ 문제 발생시 Error 발생 및 경보를 제공.
- ◎ 프린터 기능 가능 (Option)
- ◎ 탁월한 기화기 장착으로 가스 소모량 최소화

• 멸균 Cycle

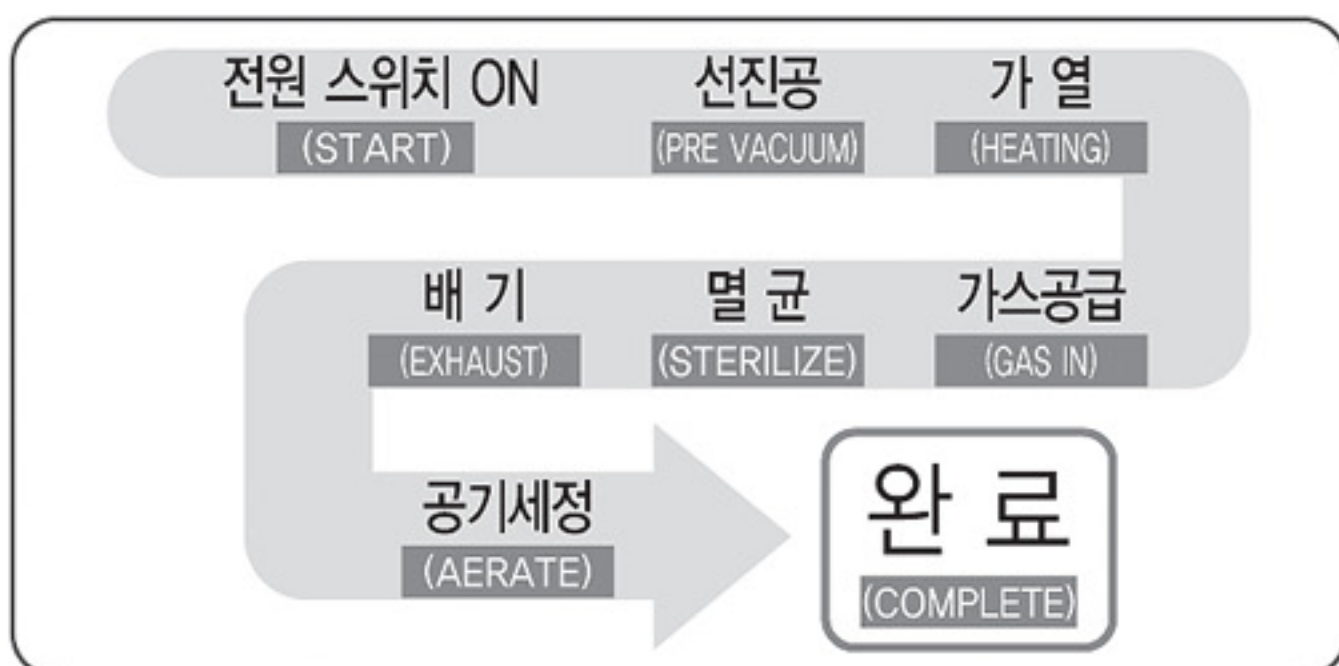


• Course Cycle

건조 시간	멸균 압력	멸균 온도	멸균 시간	세정 시간
Course 1	1.2 Bar	56°C	2H	7H
Course 2	1.2 Bar	38°C	3H	7H
Course 3		30~70°C	0~10H	0~10H

◎ SPECIFICATION (EO GAS)

모 델	SE30	SE46	SE65
전 체 치 수	(W)524mm×(H)380mm×(L)690mm	(W)557mm×(H)600mm×(L)701mm	(W)557mm×(H)600mm×(L)924mm
체 임 버	(W)244mm×(H)244mm×(L)520mm	(W)330φ×(L)540mm	(W)340φ×(L)720mm
트 레 이	1EA	1EA	1EA
전 원	AC220V/60Hz	AC220V/60Hz	AC220V/60Hz
소 비 전 력	1200W	1000W	1000W
평균온도/평균압력	38°C/1.2bar~56°C/2.1bar	38°C/1.2bar~56°C/2.1bar	38°C/1.2bar~56°C/2.1bar
공 기 제 거 방 식	진공	진공	진공
진 공 펌 프	유량 50ℓ /min	유량 100ℓ /min	유량 100ℓ /min
제 어 장 치	마이크로프로세서	마이크로프로세서	마이크로프로세서
표 시 장 치	128×64 그래픽 LCD	128×64 그래픽 LCD	128×64 그래픽 LCD
프 린 터	열전사형/2인치 롤 용지 (옵션)	열전사형/2인치 롤 용지 (옵션)	열전사형/2인치 롤 용지 (옵션)
중 량	65kg	70kg	85kg



본사 경기도 군포시 당정동 343-17 2층 Tel 031 456 3890~1 Fax 031 456 3892

서울 영업소 Tel 02 919 8889

Head Office 343-17, Dangjung-Dong, Gunpo-city, Kyungki-Do, KOREA

Tel 82 31 456 3890~1 Fax 82 31 456 3892

homepage www.alops.co.kr

